


BS-ImageStation

追加機能（分析編）


1. 染色体分離

- X 染色体と T 染色体の自動分離ができます。自動分離の前に一般分離をする必要があります。
- 自動分離ができない X 染色体でも補助的なマウス操作で簡単に手動分離できます。


(1) X 染色体自動分離

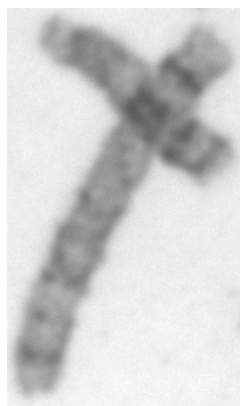

原画像

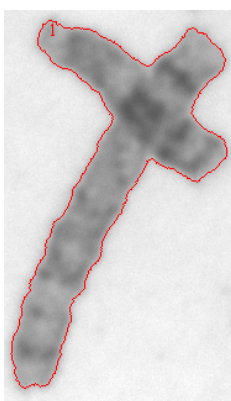

一般分離結果

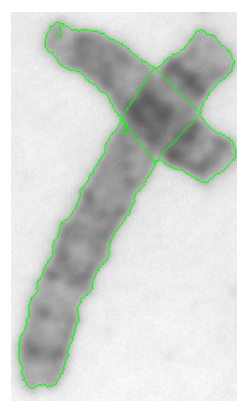


自動分離結果


(2) T 染色体自動分離



原画像

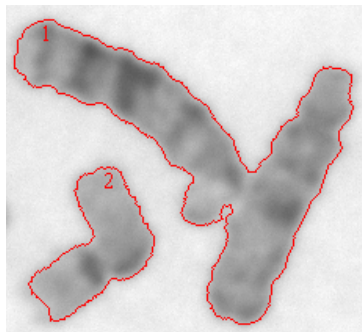


一般分離結果

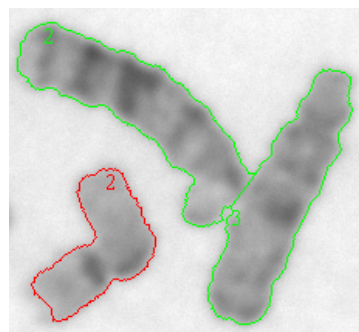


自動分離結果


(3) X 染色体手動分離

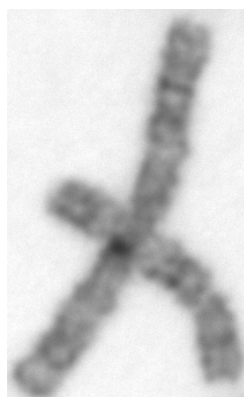


原画像

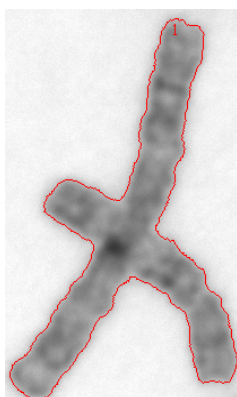

一般分離結果

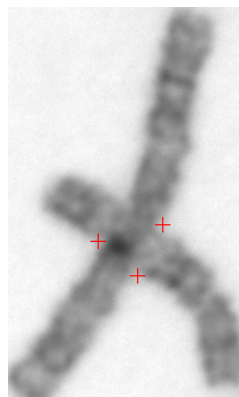


分離点選択

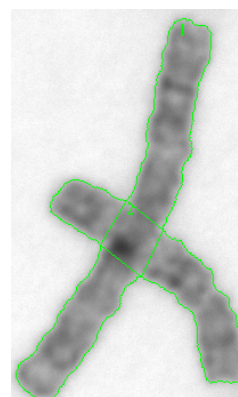

手動分離結果

2. 針状ウイルス分離


オリジナル画像

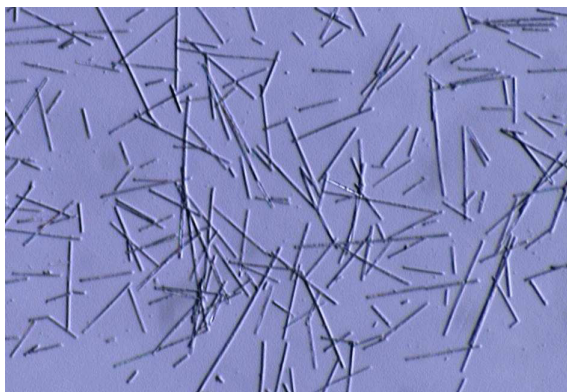


ステップ1：画像の二値化及び輪郭線の追跡結果



ステップ2：細線化した結果

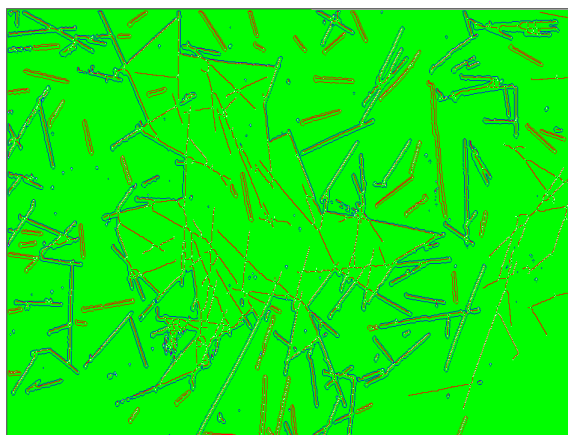

ステップ3：オブジェクトの分離結果

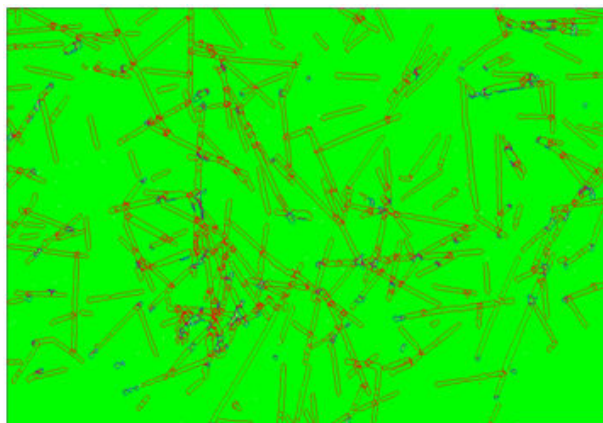

ステップ4：分離したサブオブジェクトの統合及び個々針状体の切り出し。

■ 開発者、販売者



株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail : imaging@bitstrong.com

TEL : 03-5822-5344 FAX : 03-5687-8355

URL : <http://www.bitstrong.com> (システムサイト)

: <http://www.bitstrong.net> (製品販売サイト)

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-28星野ビル6階

※コンテンツを予告なしに変更する。

bitstrong Medical Imaging Products