


# DicomStrong Viewer

## 製品説明 (画像ビューア)

本製品は、DICOM 画像ビューアとして、各種医療機器 (モダリティ) の画像を表示および解析します。ワークリストとビューアを独立した構造としたため、複数の異なる検査画像を同時に表示および解析することが可能です。

## 特徴

- 既存の院内画像サーバと容易に接続が可能です。
- 各種医療機器 (CT, MRI, CR, XA, ES, US) など様々な画像を表示/解析できます。
- ユーザアカウント毎の設定によって、一連の業務を簡単な操作で実行が可能です。
- シンプルな画面構成によって、不慣れたユーザが容易に操作できます。
- モダリティに対する画像毎に表示レイアウトやオーバーレイ表示形式を設定できます。
- PDI サーバ (DS PDI Station) と連携し、作成した診断レポートを含む PDI ファイルを自動で発行できます。
- 体脂肪解析などのオプションソフトウェアを組み込み、連動できます。

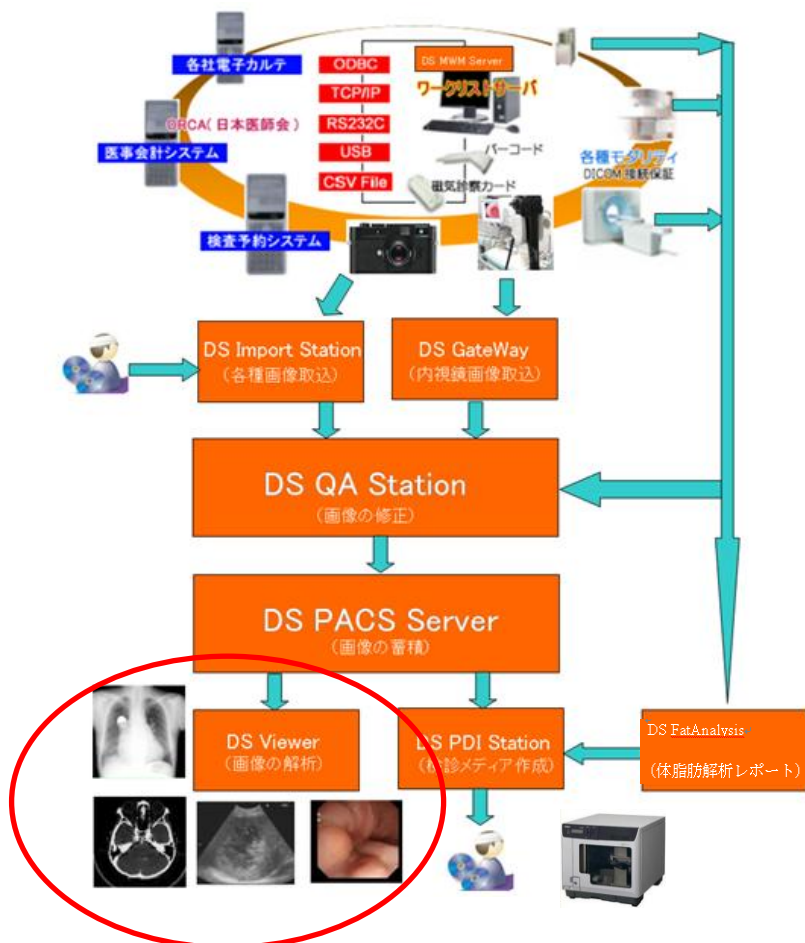

## 開発元・販売店



株式会社ビットストロング 画像営業部

e-Mail: [imaging@bitstrong.com](mailto:imaging@bitstrong.com)

TEL: 03-5822-5344 FAX: 03-5687-8355

URL: <http://www.bitstrong.com>

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町 3-27-1 大洋ビル 5階 502・503号室



## 主な機能

### 設定

- 管理者、レポート、ログイン ID 毎の設定が可能です。
- レポートの定型文として、担当者、検査部位、診断機器、病名読影事例毎に登録できます。
- ログイン ID 毎に画面レイアウト、オーバーレイ表示形式、マウス操作、キーボード操作が登録できます。

### ワークリスト

- 簡単な操作で条件に合致した検査画像を表示できます。
- 簡単な操作で当該患者の検査履歴画像を切り替えることができます。
- 前に表示した検査画像を閉じるか否かの設定に従い、新検査画像を表示できます。
- リストの表示項目の並び順、検査リストの並び順を簡単に変更できます。

### ビューア

- 多彩な画像レイアウト (1×1~6×6) で画像を表示します。
- CR 画像に対して、心胸比 (CTR) の自動測定または手動測定を行います。
- 画像の拡大/回転、距離/角度/面積などの測定を行います。
- レポート/印刷、PDI の出力、DICOM 画像転送、JPEG などのファイルの連続作成など様々な出力機能を保持します。

